

NOWOŚCI I PROMOCJE

GC EUROPE N.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

GABINET

Oferty ważne do 31 grudnia 2023




Inteligentne rozwiązania do częściowych uzupełnień

1. PREPARACJA

2. WYBÓR MATERIAŁU

1. Preparacja od A do Z

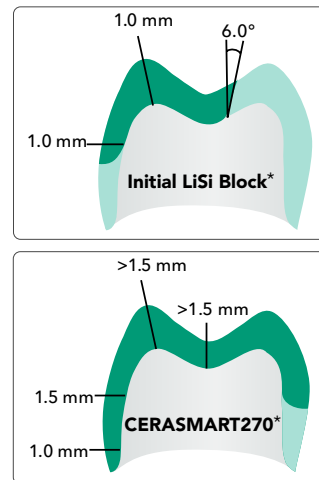

Inteligentne wskazówki dotyczące preparacji:

- ✓ Natychmiastowe uszczelnienie zębiny za pomocą **G2-BOND Universal** lub **G-Premio BOND** ochroni zębinę przed zanieczyszczeniem, wyeliminuje nadwrażliwość pozabiegową i zwiększy siłę wiązania.
- ✓ Wypełnij podcienie za pomocą **everX Flow**, aby zachować i wzmocnić pozostałą strukturę zęba.
- ✓ W razie potrzeby wykonaj podniesienie powierzchni nośnej ściany styżnej techniką *deep margin elevation* za pomocą **G-aenial Universal Injectable**.
- ✓ Szybko i skutecznie zabezpiecz preparację uzupełnieniem tymczasowym wykonanym z użyciem **Tempsmart DC** lub **Revotek LC**.

* Aby uzyskać pełne wytyczne dotyczące preparacji, należy zapoznać się z instrukcjami użycia poszczególnych materiałów.

2. Wybór materiału od A do Z

Użyj **Initial LiSi Block**,
w pełni skryształizowanego bloczka
z dwukrzemianu litu:



- ✓ Do odbudowy zębów o zniszczonej strukturze (pęknięcia, duże uszkodzenia, brak kilku guzków)
- ✓ Gdy ząb przeciwny jest odbudowany za pomocą ceramiki
- ✓ Do odbudów u dorosłych pacjentów

Użyj **CERASMART270**,
bloczka z ceramiki hybrydowej:



- ✓ Do odbudowy zębów o nieznacznie zniszczonej strukturze (mniejsze uszkodzenia)
- ✓ Do odbudów u pacjentów z bruxizmem
- ✓ Do odbudów u młodszych pacjentów



Initial LiSi Block overlay w zębie 36
Dzięki uprzejmości dr Pierre Dimitrov, Bułgaria

pośrednich

3. WYKAŃCZANIE I MALOWANIE

4. CEMENTOWANIE

3. Wykańczanie i malowanie od A do Z



Initial LiSi Block

Szybko, łatwo i estetycznie:

Polerowanie

- ✓ Standardowe gumki polerskie

LUB
Charakteryzacja

Initial LiSi Block
✓ Dodaj kolor i fluorescencję za pomocą
Initial IQ Lustre Pastes ONE

CERASMART270
✓ Malowanie i pokrywanie za pomocą
OPTIGLAZE color




CERASMART270

4. Cementowanie od A do Z

Z uwagi na niską retencję i widoczne marginesy brzeżne, częściowe uzupełnienia pośrednie w zębach bocznych wymagają produktu do osadzania o wysokiej sile wiązania, odporności na ścieranie i stabilności koloru.

Uniwersalne rozwiązanie do cementowania **G-CEM ONE** jest pierwszym wyborem do cementowania w tych wskazaniach. Zastosuj je z **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer** lub **G-Premio BOND**, gdy wymagana jest dodatkowa adhezja. Gdy preparacja (np. pod overlay) zapewnia wystarczającą retencję/utrzymanie, etap ten można całkowicie pominąć.

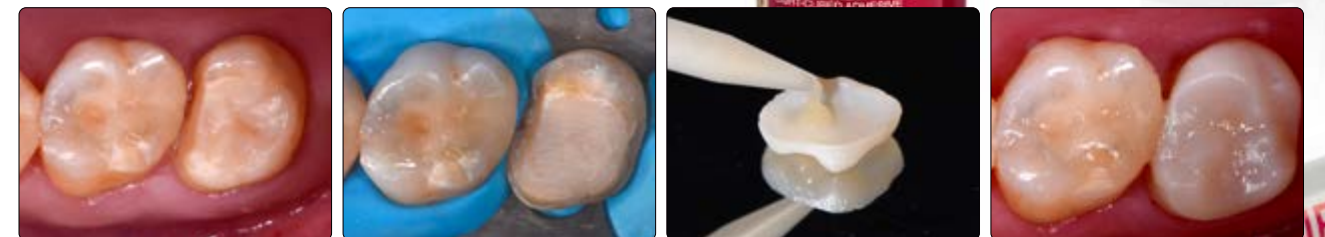

Overlay w zębie 37 wykonany z Initial LiSi Block, cementowany za pomocą G-CEM ONE i G-CEM ONE AEP
Dzięki uprzejmości dr Riccardo Tempesta, Włochy



Specjalne pakiety i promocje GC



KORZYSTNA CENA

everX Flow
+ G-aenial A'CHORD
Starter Kit STRZYKAWKI

825 zł

~~1030 zł~~
Cena zestawu

Art.-Nr 10006949 **everX Flow**
+ **G-aenial A'CHORD Starter Kit** strzykawki

Zestaw zawiera: everX Flow 1 x Bulk, 1 x Dentin (2 ml/3,7 g)
+ G-aenial A'CHORD strzykawki 1 x A2, 1 x A3 (2,1 ml/4 g)



KORZYSTNA CENA

G-Premio BOND
opakowanie 3-butelkowe
+ strzykawka kompozytu GRATIS¹!

1 020 zł

Cena zestawu

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Art. Nr 012690
G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe
Zawiera: 3 butelki po 5 ml
+ **1 strzykawka G-aenial A'CHORD A2/A3** lub
G-aenial A2/P-A2 lub **everX Flow Bulk/Dentin** GRATIS¹!



KORZYSTNA CENA

G-aenial A'CHORD
STRZYKAWKI
+ zestaw do modelowania GRATIS¹!

250 zł

Cena jednej strzykawki

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Zamów **4 strzykawki G-aenial A'CHORD**
w dowolnym odcieniu
+ **Composite Modelling Kit** o wartości 425 zł GRATIS¹!

Zestaw zawiera: 1 x Modelling Liquid butelka 6 ml,
5 x pędzelek płaski Gradia Brush Flat, 5 x pędzelek
okrągły Gradia Brush Round, 2 x uchwyt do pędzelków
Gradia, 1 x bloczki do mieszania.



KORZYSTNA CENA

G-aenial A'CHORD
STRZYKAWKI
+ instrument do modelowania GRATIS¹!

250 zł

Cena jednej strzykawki

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Zamów **5 strzykawek G-aenial A'CHORD**
w dowolnym odcieniu
+ **instrument do modelowania American Eagle M5
SCULPT** o wartości 260 zł GRATIS¹!



KORZYSTNA CENA

Initial LiSi Block
+ EVE Diapol Twist
Polishers

915 zł

~~980 zł~~
Cena zestawu

Art.-Nr 10007249 **Zestaw Initial LiSi Block Mill-Polish-Place**
w pakiecie z EVE Diapol Twist Polisher

Zestaw zawiera: 10 bloczków (3 x A2 HT, 2 x A2 LT;
3 x A3 HT, 2 x A3 LT) + EVE Diapol Twist Polishers



KORZYSTNA CENA

Initial LiSi Block
Aesthetic Kit

1 720 zł

~~1 910 zł~~
Cena zestawu

Art. Nr 901601 **Initial LiSi Block Aesthetic Kit**

Zestaw zawiera: Initial LiSi Block, CEREC, rozmiar 14, po 1 bloczku
w 5 odcieniach: A1 HT; A2 HT; A2 LT; A3 HT; A3 LT; Initial IQ,
Lustre Paste ONE, po 1 słoiczku 4 g w 5 kolorach: L-NFL; L-A; L-3; L-2;
L-OP; Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF, płyn rozcieńczający, 8 ml; płyn
odświeżający, 8 ml; akcesoria



KORZYSTNA CENA

Initial LiSi Block
+ G-CEM ONE

1 445 zł

~~1 745 zł~~
Cena zestawu

Art.-Nr. 10007572 **Initial LiSi Block**
+ **G-CEM ONE Starter Kit**

Zestaw zawiera: Initial LiSi Block
(5 bloczków A2 LT, 5 bloczków A2 HT, 5 bloczków A3 HT),
1 x G-CEM ONE Starter Kit A2 (1 x strzykawka G-CEM ONE A2
(4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo
Tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml)



KORZYSTNA CENA

G-CEM ONE Universal System Kit
+ G-CEM ONE Single Refill
GRATIS¹!

760 zł

Cena zestawu

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Art.-Nr. 10037120 **G-CEM ONE Universal Kit**
Zestaw zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka A2 (4,6 g),
1 x G-CEM ONE strzykawka TR (4,6 g), 15 x końcówka
mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka
mieszająca GC Automix Endo tips, 1 x G-Premio BOND
5 ml, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml.
+ **G-CEM ONE Single Refill AO3** GRATIS¹!

everX Flow™

Wzmocniony krótkimi włóknami kompozyt płynny do obudowy zębiny

ODCIEŃ BULK,
O GŁĘBOKOŚCI
UTWARDZANIA
DO 5,5 MM,
OPTIMALNY
DO ROZLEGŁYCH
UBYTKÓW!



Ten produkt jest integralną częścią koncepcji Onlay & Overlay od A do Z.



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo

KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3
265 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki everX Flow w dowolnym odcieniu + 1 strzykawkę everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!
Zamów 10 strzykawek everX Flow w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!

Art. Nr 012900 **everX Flow Bulk** 265 zł
Strzykawka 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, osłona chroniąca przed światłem

Art. Nr 012901 **everX Flow Dentin** 265 zł
Strzykawka 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, osłona chroniąca przed światłem

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Absolutnie stabilna struktura

everX Flow to nowe rozwiązanie GC do trwałego i nieskomplikowanego wzmocnienia wszystkich Twoich uzupełnień. Dzięki łatwości użycia, dwóm kolorom i wyjątkowej wytrzymałości, everX Flow szybko stanie się Twoim nowym produktem numer 1 do wszystkich uzupełnień wymagających stabilnej struktury. Odcień „Bulk” o głębokości utwardzania 5,5 mm jest idealny do głębokich ubytków zębów bocznych, podczas gdy odcień „Dentin” o głębokości utwardzania 2,0 mm - materiałem z wyboru zapewniającym uzyskanie znakomitych rezultatów estetycznych.

everX Posterior®

Wzmocniona włóknem kompozytowa podbudowa do dużych ubytków

Art. Nr 005274 **everX Posterior** 1 045 zł
Zawiera: 50 ampułek unitip x 0,13 ml (0,25 g)

Art. Nr 005118 **everX Posterior** 350 zł
Zawiera: 15 ampułek unitip x 0,13 ml (0,25 g)



G-ænial™ Universal Injectable

Wstrzykuj nasz najmocniejszy materiał do odbudowy bezpośredniej

Płynna konsystencja - długotrwała wytrzymałość
Zoptymalizuj swój sposób pracy!

Innowacyjna konstrukcja zapewnia łatwą aplikację bez efektu spływania
Dzięki bezproblemowemu dozowaniu i łatwej aplikacji materiału nasze strzykawki i ampułki unitip są przyjazne w użyciu



Ten produkt jest integralną częścią koncepcji Onlay & Overlay od A do Z.



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



STRZYKAWKI

G-ænial Universal Injectable
strzykawka 1 ml/1,7 g;
Cena jednej strzykawki: 170 zł

AMPUŁKI UNITIP

G-ænial Universal Injectable
ampułki 15 x 0,16 ml/0,27 g;
Cena jednego opakowania: 255 zł

Odcienie: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE

- Ultradrobny wypełniacz ze szkła barowego (150µm)
- Wysoka zawartość wypełniacza
- Technologia pełnego pokrycia powłoką silanową (FSC) poprawia: dyspersję i adhezję wypełniaczy w matrycy
- Bez kleistości
- Mała siła przy wyciskaniu
- Wysoki kontrast na zdjęciach rtg

EXACLEAR

Transparentny materiał poliwinylsiloksanowy - Twój partner do przejrzystej pracy.

Idealny do:

- Techniki formowania metodą iniekcji: łatwa kontrola podczas wstrzykiwania i skuteczne utwardzanie światłem
- Techniki warstwowego nakładania kompozytów: łatwe utwardzanie światłem od strony podniebiennej

Tymczasowych koron i mostów:

Skuteczne utwardzanie światłem materiałów o podwójnym utwardzaniu, takich jak TEMPSMART DC

- Umieszczania włókien szklanych lub zamków: łatwe przenoszenie z modelu do jamy ustnej



Art. Nr 012792 **EXACLEAR**
2 naboje (48 ml), 6 końcówek mieszających II L; 315 zł

Akcesoria:
Art. Nr 900114 60 końcówek mieszających II L (Green/Blue); 345 zł



Art. Nr 901532 **Injection Moulding Kit**, 595 zł
Zestaw zawiera: 3 strzykawki (1 ml/1,7 g) G-ænial Universal Injectable po jednej w odcieniu A1, A2, A3; 1 nabój (48 ml) EXACLEAR; 3 końcówki mieszające II L.

NOWOŚĆ

Optymalnie dostosowany
do techniki IDS
(Immediate Dentin Sealing)!

G2-BOND Universal


Nowy standard 2-butelkowego uniwersalnego systemu łączącego
Produkt wytyczający nowy standard w Twoich rękach

G2-BOND Universal, dzięki opatentowanej technologii Dual-H, która zapewnia zaawansowane, zoptymalizowane połączenie zarówno z zębem, jak i kompozytem, jest uniwersalnym systemem 2-butelkowym, łączącym w sobie to, czego klinicyści oczekują od istniejących złotych standardów samowytwarzania (Self-Etch) oraz wytwarzania i płukania (Etch-and-Rinse), a nawet więcej:

- Możliwość wyboru preferowanego trybu wytwarzania
- Najwyższą trwałość i wytrzymałość wiązania
- Najwyższą odporność na przebarwienia brzężne
- Doskonałe dozowanie i niską wrażliwość na technikę
- Szerokie zastosowanie
- Nowoczesną, inteligentną i ergonomiczną konstrukcję 1-PRIMER / 2-BOND

Wytycza drogę do nowego 2-butelkowego standardu systemu łączącego we wszystkich trybach wytwarzania

Dla wszechstronnej satysfakcji i komfortu Twoich pacjentów!

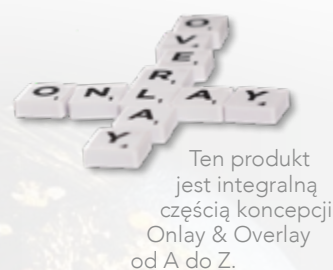

Ten produkt jest integralną częścią koncepcji Onlay & Overlay od A do Z.



JUŻ TERAZ
ZACZNIJ STOSOWAĆ

660 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10006820
G2-BOND Universal Bottle Kit
1 x 1-PRIMER 5 ml, 1 x 2-BOND 5 ml, akcesoria

Uniwersalne zastosowanie unikalnej kompozycji

- 4-MET dla niezawodnej adhezji do szkliwa i zębiny
- MDP dla doskonałej adhezji do szkliwa i zębiny, cyrkonu, tlenku glinu i metali nieszlachetnych
- MDTP do łączenia z metalami szlachetnymi
- System łączący bez HEMA dla potwierdzonej klinicznie wyjątkowej trwałości²

² Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

ZWYCIĘSKA 2!

Nasze wydajne i niezawodne systemy wiążące do wszystkich codziennych wyzwań związanych z odbudową

- Doskonała adhezja do szkliwa i zębiny
- Optymalna konsystencja i zwilżalność
- Natychmiastowe uszczelnienie zębiny
- Do kompozytów, tlenku cyrkonu, tlenku glinu i metali, a także do wszystkich ceramiek szklanych (skaleniowych, wzmocnionych leucytem i na bazie dwukrzemianu litu) i do ceramiek hybrydowych w połączeniu z G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = mechanizm podwójnego utwardzania
- Redukcja przebarwień
- Mniej nadwrażliwości pozabiegowej
- Mniej czasochłonna i eliminująca straty materiału procedura



ZAMKNIĘCIE FLIP-TOP

Korzystaj z wysokiej wydajności, odkrywając jednocześnie łatwiejsze użytkowanie

300 aplikacji na jedną butelkę 5 ml

Jako opcja:



G-Premio BOND DCA = aktywator podwójnego utwardzania

Skontaktuj się z konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji.

G-Premio BOND

Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy uniwersalny system łączący do wszystkich technik łączenia, idealny do napraw i do stosowania przy nadwrażliwości!



Ten produkt jest integralną częścią koncepcji Onlay & Overlay od A do Z.



G-Premio BOND
UZUPEŁNIENIE

400 zł

Cena jednego opakowania

Art.-Nr. 012695

G-Premio BOND uzupełnienie
1 butelka 5 ml; 400 zł

G-Premio BOND
OPAKOWANIE 3-BUTELKOWE

+ STRZYKAWKA
KOMPOZYTU GRATIS!

1 020 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 1 x G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe + 1 strzykawkę G-aenial A'CHORD A2/A3, G-aenial A2/P-A2 lub everX Flow Bulk/Dentin GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Art. Nr 012690 **G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe**
Zestaw zawiera: 3 butelki po 5 ml,
Cena zestawu: 1 020 zł

Inne dostępne opakowania:
Art. Nr 009035 **G-Premio BOND Unitdose**
50 jednostkowych ampulek (po 0,1 ml), akcesoria; 540 zł
Art. Nr 012689 **G-Premio BOND Zestaw Starter**
1 butelka 5 ml, akcesoria; 500 zł
Art. Nr 009552 **G-Premio BOND DCA**
1 butelka 3 ml aktywatora Dual Cure (DCA); 225 zł



Zredukowany kontakt między osłoną a butelką

Żebrowanie skonstruowane do skutecznego dociskania

¹ Wskazania: Bezpośrednie łączenie kompozytów I Naprawa wewnątrzna I Natychmiastowe uszczelnienie zębiny (IDS) I Leczenie nadwrażliwości I Leczenie odsłoniętych powierzchni korzeni I Cementowanie uzupełnień pośrednich (z G-CEM LinkForce) I Cementowanie wkładów i odbudowa zębów (z GRADIA CORE i G-Premio BOND DCA).

Inne dostępne opakowania:

Art.-Nr. 10006823 **G2-BOND Universal 1-PRIMER**
uzupełnienie 1 x butelka 5 ml; 485 zł

Art.-Nr. 10006824 **G2-BOND Universal 2-BOND**
uzupełnienie 1 x butelka 5 ml; 205 zł



CERASMART™270

Absorbujące naprężenia bloczki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej


Naturalne dopasowanie i elastyczność
Precyzja, wytrzymałość i elastyczność w połączeniu z łatwą w użyciu, światłoutwardzalną glazurą do pokrywania powierzchni



Ten produkt jest integralną częścią koncepcji Onlay & Overlay od A do Z.



Odcienie

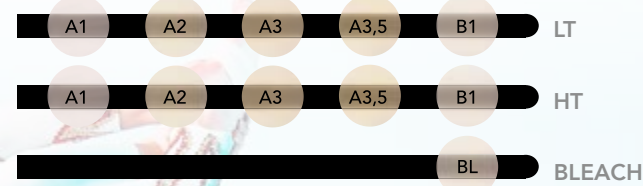

- Elastyczność umożliwiająca absorpcję naprężeń
- Odporność na ścieranie dla trwałych uzupełnień
- Niezwykłe precyzyjne brzegi zapewniające płynne przejścia
- Doskonała polerowalność i trwałość połysku
- Optymalna fluorescencja i przezierność
- Korona podparta na implancie
- Wymiana dużego uzupełnienia kompozytowego wykonanego z użyciem świeków okołomiazgowych
- Odbudowa drugiego trzonowca
- Rekonstrukcja zębów w kwadrancie

OPTIGLAZE color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji pośrednich uzupełnień akrylowych, kompozytowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D

KORZYSTNA CENA

3 + 1

255 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania OPTIGLAZE Color w dowolnym odcieniu
+ 1 opakowanie OPTIGLAZE Color w odcieniu A plus lub Clear GRATIS¹!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

OPTIGLAZE color opakowania uzupełniające, 2,6 ml; 255 zł
Odcienie: A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink

OPTIGLAZE color opakowanie uzupełniające, 5 ml; 255 zł
Odcienie: Clear; Clear HV



Kliknij tutaj, aby przejść do strony internetowej: Initial LiSi Block -kampanie-gceurope



initial™
LiSi Block

GC Initial™ LiSi Block

W pełni skryształizowany bloczek CAD/CAM z dwukrzemianu litu

Naturalne piękno przywrócone w ciągu jednej wizyty

Initial LiSi Block: wytrzymałość, precyzja i estetyka w całkowicie skryształizowanym bloczku

Initial LiSi Block jest w pełni skryształizowanym bloczkiem z dwukrzemianu litu, który zapewnia optymalne właściwości fizyczne bez wypalania. Bloczek cechują wyjątkowe właściwości oparte na opatentowanej przez GC technologii HDM (High Density Micronization) użytej w stomatologii CAD/CAM, aby zapewnić wysoką odporność na ścieranie, precyzyjne krawędzie i estetyczne efekty końcowe. W połączeniu z techniką ONE SQIN – systemem ceramicznym do malowania koloru i nadawania kształtu - można szybko i łatwo osiągnąć jeszcze bardziej estetyczne rezultaty.



KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3

490 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu
+ 1 opakowanie bloczków Initial LiSi Block (5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS¹!
Zamów 10 opakowań bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu
+ 3 opakowania bloczków Initial LiSi Block (5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS¹!

NOWE ODCIENIE JUŻ DOSTĘPNE: A3.5 HT, A3.5 LT i BL
Odcienie: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, BL; Rozmiar 14: 490 zł
Opakowanie zawiera 5 bloczków

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

KORZYSTNA CENA

10%

1 720 zł


~~1 910 zł~~

Cena jednego opakowania

Art.-Nr. 10007322 Initial LiSi Block Aesthetic Kit
Zestaw zawiera: Initial LiSi Block, CEREC, rozmiar 14, po 1 bloczku w 5 odcieniach: A1 HT; A2 HT; A2 LT; A3 HT; A3 LT; Initial IQ, Lustre Paste ONE, po 1 słoiczku 4 g w 5 kolorach: L-NFL; L-A; L-3; L-2; L-OP; Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF, płyn rozcieńczający, 8 ml; płyn odświeżający, 8 ml; akcesoria; 1 720 zł




Polerowanie i wykańczanie

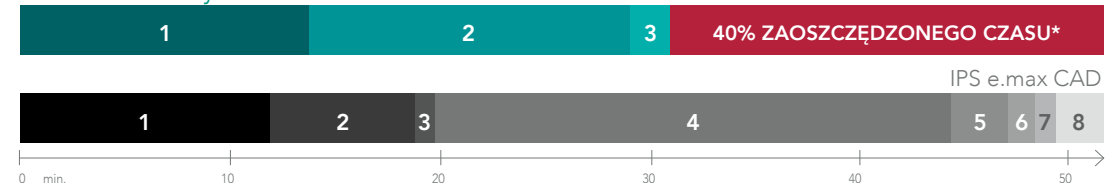


1 Frezowanie 2 Polerowanie wstępne 3 Nakładanie masy do wypalania ceramiki 4 Kryształizacja 5 Chłodzenie 6 Usuwanie masy do wypalania ceramiki 7 Oczyszczanie 8 Polerowanie końcowe
Źródło: GC R&D, Japonia, dane dostępne na życzenie. *Przy warunkach testu w oparciu o Instrukcję użytkownika

CERASMART270
GC INITIAL LISI BLOCK
OPTIGLAZE COLOR

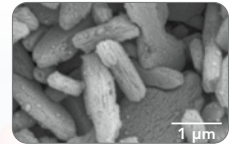

Konwencjonalny dwukrzemian litu (IPS e.max CAD)

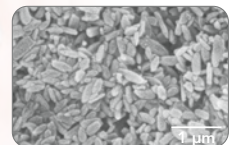

Technologia HDM dla CAD/CAM (Initial LiSi Block)

Drobniejsze kryształy ułatwiają frezowanie i zapewniają wysoką odporność na ścieranie.

Zwiększona sztywność matrycy szklanej zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną

- Oszczędność czasu, ponieważ nie wymaga kryształizacji
- Trwała estetyka
- Idealnie dopasowane krawędzie
- Naturalna opalescencja
- Idealna baza dla techniki ONE SQIN
- Po prostu wyfrezuj, pomaluj i zacementuj

G-CEM ONE™

Samoadhezyjny cement kompozytowy



Niezawodny

Optymalna siła wiązania zarówno w przypadku preparacji o charakterze retencyjnym jak i nieretencyjnym¹ dzięki funkcji GC Touch Cure - unikalnej zdolności wiązania kontaktowego opcjonalnie stosowanego primera G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer.

Niewrażliwy na technikę pracy

Doskonałe samoutwardzanie dla Twojego poczucia bezpieczeństwa, funkcja tack-cure ułatwiająca usuwanie nadmiaru i oczyszczanie, tolerancja wilgoci i śliny¹, optymalna płynność pasty i praktycznie brak nadwrażliwości pozabiegowej³.

Uniwersalny

Doskonała siła wiązania do zębów oraz do powierzchni i podłoży: szkliva, zębiny, cyrkonu, metalu, ceramiki szklanej², ceramiki hybrydowej².

GC Touch Cure

Inicjator chemiczny w G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer przyspiesza utwardzanie chemiczne cementu na powierzchni zęba w celu zapewnienia stabilnego połączenia.

Opcjonalny: G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Do wszystkich ubytków i zębów filarowych

- MDP: łączenie z tkankami zęba, cyrkonem i metalem nieszlachetnym
- 4-MET: łączenie z tkankami zęba
- MDTP: łączenie z metalem szlachetnym
- Akcelerator - silne połączenie z zębem filarowym i ubytkiem dzięki funkcji GC Touch Cure.



KORZYSTNA CENA

G-CEM ONE SYSTEM KIT

+ DODATKOWO
G-CEM ONE
UZUPEŁNIENIE GRATIS!

660 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 1 opakowanie G-CEM ONE System Kit + G-CEM ONE Single Refill AO3 GRATIS!

Art. Nr 10006929 **G-CEM ONE System Kit**
Zestaw System Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE strzykawka TR (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml;
Cena jednego opakowania: 660 zł

¹ Z użyciem G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

² Z użyciem G-Multi PRIMER

³ Wyniki z badań zewnętrznych. Tylko przy użyciu G-CEM ONE. Dane dostępne na życzenie.

G-CEM ONE STARTER KIT

JUŻ TERAZ ZACZNIJ
STOSOWAĆ

345 zł
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10006927 **G-CEM ONE Starter Kit A2**
Art. Nr 10006928 **G-CEM ONE Starter Kit Translucent**
Zestaw Starter Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml;
Cena jednego opakowania: 345 zł


Art. Nr 10006930 **G-CEM ONE Twin Refill A2**
Art. Nr 10006931 **G-CEM ONE Twin Refill Translucent**
Zestaw Twin Refill zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips;
Cena jednego opakowania: 530 zł

Art. Nr 10006932 **G-CEM ONE Single Refill AO3**
Art. Nr 10006933 **G-CEM ONE Single Refill White Opaque**
Zestaw Single Refill zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips;
Cena jednego opakowania: 285 zł

Art. Nr 10006934 **G-CEM ONE Value Refill A2**
Art. Nr 10006935 **G-CEM ONE Value Refill Translucent**
Zestaw Value Refill zawiera: 8 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 60 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 20 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips;
Cena jednego opakowania: 1 705 zł

Art. Nr 10006834 **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer**
Zawiera: 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml;
Cena jednego opakowania: 295 zł

Akcesoria:
Art. Nr 10003289 **Automix Tip for Endo**
10 szt. z końcówką przedłużającą; 65 zł
Art. Nr 10003335 **Automix Tip Regular**
10 szt.; 60 zł

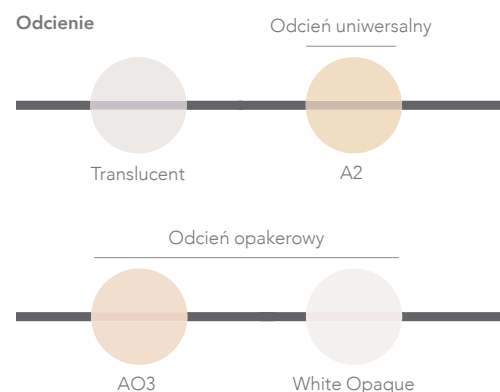

G-CEM ONE Universal

Uniwersalny, samoadhezyjny cement kompozytowy

G-CEM ONE można opcjonalnie stosować w połączeniu z innowacyjnym primerem G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (AEP), gdy wymagana jest dodatkowa adhezja. Od marca 2023 roku GC, jako dodatkową opcję, rekomenduje stosowanie G-CEM ONE w połączeniu z uniwersalnym systemem łączącym G-Premio BOND. Niezależnie od tego, czy chcesz skorzystać z funkcji utwardzania kontaktowego >Touch Cure< primera G-CEM ONE AEP, czy preferujesz uniwersalną procedurę adhezyjną i utwardzanie światłem G-Premio BOND, zawsze znajdziesz odpowiednie rozwiązanie.

Niewidoczne marginesy dla wysoce estetycznych rezultatów:

- Odporne na ścieranie brzegi
- Długotrwałe efekty estetyczne

Funkcja utwardzania kontaktowego >Touch Cure< dzięki G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (AEP):

- Bardzo skuteczne samoutwardzanie,
- Niezawodne i szybkie wiązanie nawet w wymagających sytuacjach klinicznych, zwłaszcza gdy utwardzanie światłem jest ograniczone,
- Łatwa aplikacja: nałożyć G-CEM ONE AEP, odczekać 10 sekund i rozdmuchać powietrzem - utwardzanie światłem nie jest wymane.

Uproszczona, uniwersalna procedura adhezyjna dzięki G-Premio BOND:

- Połączenie trzech monomerów funkcyjnych zapewnia optymalną adhezję - tylko jeden system wiążący do wszystkich bezpośrednich i pośrednich uzupełnień!
- Wielokrotnie nagradzana konstrukcja butelki zapewnia bardzo precyzyjną aplikację.
- Łatwa aplikacja: Nałożyć G-Premio BOND, odczekać 10 sekund, osuszyć sprężonym powietrzem, utwardzać światłem przez 10 sekund.
- Kompatybilny ze wszystkimi metodami wytrawiania (samowytrawianie, wytrawianie selektywne, wytrawianie całkowite).

Rozwiązania do cementowania

Przewodnik GC dotyczący cementowania "Luting Guide" pomoże Ci wybrać właściwy materiał. Zawiera również informacje dotyczące poszczególnych etapów cementowania.

Pobierz w App-Store:



GC Luting Guide



Ten produkt jest integralną częścią koncepcji Onlay & Overlay od A do Z.

NOWOŚĆ



Teraz również w połączeniu z G-Premio BOND!

G-CEM ONE jest teraz dodatkowo dostępny w trzech nowych opakowaniach z G-Premio BOND.

Art.-Nr. 10037118 **G-CEM ONE Universal Starter Kit A2**
1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml; 530 zł

Art.-Nr. 10037119 **G-CEM ONE Universal Starter Kit Translucent**
1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml; 530 zł

Art.-Nr. 10037120 **G-CEM ONE Universal System Kit**
1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml; 1 x G-Multi PRIMER 5 ml; 760 zł



G-æNIAL A'CHORD

Zaawansowany uniwersalny kompozyt z prostotą jedno-odcieniowego systemu

Prostota, estetyka i efektywność w Twoich rękach

Naturalna fluorescencja

G-æNIAL A'CHORD tworzy piękny, niewidoczny i naturalnie fluorescencyjny efekt końcowy w każdych warunkach oświetleniowych w tym w świetle UV lub bliskim UV, dając pacjentom zapewniający pewność siebie uśmiech.

Uproszczona procedura postępowania

G-æNIAL A'CHORD zapewnia niezmiennie prostą obróbkę, zarówno przy modelowaniu za pomocą instrumentu ręcznego, jak i przy użyciu pędzelka. Jest to możliwe dzięki nieklejącym się monomerom oraz zoptymalizowanej kombinacji wypełniacz-monimer, pochodzącej z opatentowanych technologii FSC i HPC (dane dostępne na życzenie).

Długotrwały połysk

Niewidoczna estetyka nawet przy ekstremalnych wyzwaniach. Oprócz 5 podstawowych odcieni, G-æNIAL A'CHORD rozszerza swoją ofertę o 2 odcienie szybkowe dla starszych pacjentów, 3 odcienie opakerowe do maskowania przebarwień, 2 odcienie szklane do uzyskania naturalnej przezierności i 2 odcienie wybielone do jaśniejszych uśmiechów. Dzięki temu możliwe jest tworzenie niewidocznych wypełnień nawet przy ekstremalnych wymaganiach.

Efekt oszczędzający czas

Wyjątkowo wysoki połysk przy minimalnym polerowaniu.



Przed polerowaniem Po polerowaniu

© Dr J. Tapia Guadix, Hiszpania



KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3
OD 250 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki lub 4 opakowania ampułek G-æNIAL A'CHORD w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka lub 1 opakowanie ampułek G-æNIAL A'CHORD A2 lub A3 GRATIS!
Zamów 10 strzykawek lub 10 opakowań ampułek G-æNIAL A'CHORD w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki lub 3 opakowania ampułek G-æNIAL A'CHORD A2 lub A3 GRATIS!

Promocja ważna dla tego samego rodzaju opakowania.
¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

4 x G-æNIAL A'CHORD STRZYKAWKI

COMPOSITE MODELLING KIT GRATIS!

Zamów 4 strzykawki G-æNIAL A'CHORD w dowolnym odcieniu + Composite Modelling Kit o wartości 425 zł GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Prostota A'CHORD

- uproszczony system jednoodcieniowy
- uproszczona procedura postępowania
- po prostu uniwersalny

Estetyka A'CHORD

- naturalna fluorescencja
- długotrwały połysk
- ekstremalne wyzwania



5 x G-æNIAL A'CHORD STRZYKAWKI lub AMPUŁKI UNITIP

INSTRUMENT GRATIS!


Zamów 5 strzykawek lub 5 opakowań ampułek G-æNIAL A'CHORD w dowolnym odcieniu + instrument do modelowania American Eagle M5 SCULPT o wartości 260 zł GRATIS!

Promocja ważna dla tego samego rodzaju opakowania.
¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.



Rewolucyjna technologia A'CHORD

- chroniony patentem wypełniacz i powłoka
- wysoka odporność na przebarwienia i ścieranie
- doskonały kontrast na zdjęciach rtg

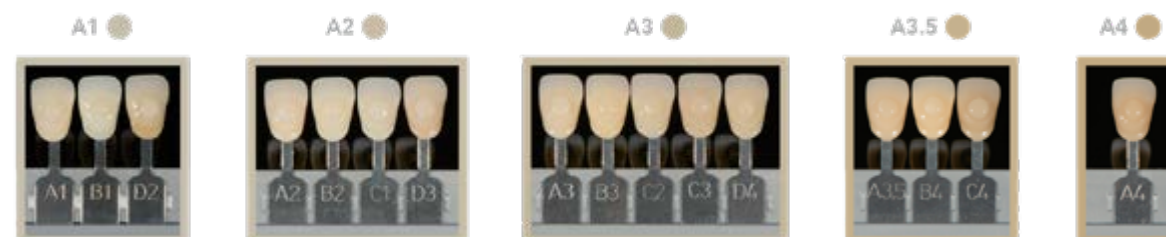

STRZYKAWKI

Art. Nr 10006835
G-æNIAL A'CHORD Layering Kit
Zestaw zawiera: 5 strzykawek (2,1 ml/4 g) po jednej w odcieniu: A2, A3, AO2, AE, JE
Cena zestawu: 1 130 zł

Art. Nr 10006836
G-æNIAL A'CHORD Core Kit
Zestaw zawiera: 5 strzykawek (2,1 ml/4 g) po jednej w odcieniu: A1, A2, A3, A3.5, A4
Cena zestawu: 1 130 zł

Art. Nr 10006769
G-æNIAL A'CHORD Trial Kit A
Zestaw zawiera: 3 strzykawki (2,1 ml/4 g) 2 x A2, 1 x A3
Cena zestawu: 680 zł

Art. Nr 10006771
G-æNIAL A'CHORD Bleach Kit
Zestaw zawiera: 3 strzykawki (2,1 ml/4 g) po jednej w odcieniu BW, BOW, JE
Cena zestawu: 680 zł

Strzykawki uzupełnienie
1 strzykawka (2,1 ml/4 g)
Odcienie standardowe:
A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;
Odcienie opakerowe: AO1, AO2, AO3;
Odcienie szklane: JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel);
Odcienie wybielone: BW (Bleaching White), BOW (Bleaching Opaque White);
Cena jednej strzykawki: 250 zł

AMPUŁKI UNITIPS

Art. Nr 10006772
G-æNIAL A'CHORD Layering Kit Unitips
Zestaw zawiera: 75 ampułek (0,16 ml/0,3 g) po 15 w odcieniach: A2, A3, AO2, AE, JE
Cena zestawu: 1 210 zł

Art. Nr 10006773
G-æNIAL A'CHORD Core Kit Unitips
Zestaw zawiera: 75 ampułek (0,16 ml/0,3 g) po 15 w odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, A4
Cena zestawu: 1 210 zł

Ampułki unitip uzupełnienie
15 ampułek (0,16 ml/0,3 g)
Odcienie standardowe:
A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;
Odcienie opakerowe: AO1, AO2, AO3;
Odcienie szklane: JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel);
Odcienie wybielone: BW (Bleaching White), BOW (Bleaching Opaque White);
Cena jednego opakowania: 270 zł

Zeskanuj, aby przejść do strony internetowej G-æNIAL A'CHORD
<http://gaenialachord.com>



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



G-æniał

Uniwersalny kompozyt do niewidocznych uzupełnień – z systemem doboru koloru dostosowanym do wieku



G-æniał Anterior oferuje

- Estetykę i kontrast w obrazie rtg
- Wszechstronność w stosowaniu
- System odcieni dostosowany do wieku pacjenta
- Bezproblemową pracę



G-æniał Posterior oferuje

- Doskonałą estetykę przy użyciu pojedynczego odcienia
- Optymalną nieprzepuszczalność dla promieni rtg
- Nie klejącą się, umożliwiającą kondensację konsystencję
- Doskonałą wytrzymałość i trwałość



PROMOCJA AMPUŁKI UNITIP

4 + 1
10 + 3
OD
210 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania ampułek unitip G-æniał Anterior/ Posterior w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie G-æniał A2 lub P-A2 GRATIS!¹

Zamów 10 opakowań ampułek unitip G-æniał Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + 3 opakowania G-æniał A2 lub P-A2 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja obowiązuje w ramach tego samego rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Art. Nr 004650 ampułki unitip A2
Art. Nr 004651 ampułki unitip A3
Art. Nr 004672 ampułki unitip P-A2
Art. Nr 004673 ampułki unitip P-A3

Opakowania Anterior zawierające po 20 ampułek unitip: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE;
Opakowania Anterior zawierające po 10 ampułek unitip: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW;
Opakowania Posterior zawierające po 20 ampułek unitip: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

PROMOCJA STRZYKAWKI

4 + 1
10 + 3
240 zł
Cena jednej strzykawki

Zamów 4 strzykawki G-æniał Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka G-æniał A2 lub P-A2 GRATIS!¹

Zamów 10 strzykawek G-æniał Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki G-æniał A2 lub P-A2 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja obowiązuje w ramach tego samego rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Art. Nr 004679 strzykawka A2
Art. Nr 004680 strzykawka A3
Art. Nr 004700 strzykawka P-A2
Art. Nr 004701 strzykawka P-A3

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE i P-IE



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



Szkolenie praktyczne: ESTETYKA ŁATWA DO OSIĄGNIĘCIA

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji.



Konfigurator GC Restorative Dentistry Guide w wersji 3D, do bezpłatnego pobrania na stronie: www.gceurope.com



G-æniał Flo X

Idealny partner do wszystkich odbudów w odcinku bocznym!

G-æniał Flo X zawiera równomiernie rozmieszczone, ultra-drobne cząstki wypełniacza (wypełniacz ze szkła barowego) i wyróżnia się niską lepkością, a w szczególności bardzo dobrym kontrastem obrazu rtg (300% Al przy warstwie 1 mm, 284% Al przy warstwie grubości 0,5 mm), co między innymi ułatwia diagnozowanie próchnicy wtórnej.



Art. Nr 900720 G-æniał Flo X A2
Art. Nr 900721 G-æniał Flo X A3

G-æniał Flo X; 240 zł
Strzykawka 3,6 g (2 ml); 20 końcówek aplikacyjnych
Dispensing Tip III z tworzywa;
1 osłona chroniąca przed światłem

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 i AO3

MIX MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

4 + 1 | 10 + 3

Zamów MIX 4 strzykawek spośród: G-æniał Anterior/Posterior/G-æniał Universal Flo/G-æniał Flo X/ G-æniał A'CHORD/Essentia/everX Posterior/everX Flow w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka G-æniał A2 lub P-A2 GRATIS!¹

Zamów MIX 10 strzykawek spośród: G-æniał Anterior/Posterior/G-æniał Universal Flo/G-æniał Flo X/ G-æniał A'CHORD/Essentia/everX Posterior/everX Flow w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki G-æniał A2 lub P-A2 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja obowiązuje w ramach tego samego rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z konsultantem GC.

G-æniał Universal Flo

Płynny i w pełni uniwersalny do wszystkich klas ubytków

Ze względu na wyjątkową płynność G-æniał Universal Flo może być stosowany jak płynny, a jest tak samo stabilny, jak konwencjonalny kompozyt. Nadaje się do wszystkich klas ubytków i odznacza się doskonałą wytrzymałością, polerowalnością i wszechstronnością.



Art. Nr 004620 G-æniał Universal Flo A2
Art. Nr 004621 G-æniał Universal Flo A3

G-æniał Universal Flo; 245 zł
Strzykawka 3,4 g (2 ml); 20 końcówek aplikacyjnych
Dispensing Tip III z tworzywa;
1 osłona chroniąca przed światłem

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV, AO2, AO3, JE, AE

G-æniał Universal Injectable

Kompozyt o wysokiej wytrzymałości do odbudowy ubytków
Płynna konsystencja - długotrwała wytrzymałość

G-æniał Universal Injectable jest uniwersalnym kompozytem odtwórczym o wyjątkowej wytrzymałości i trwałości dla długotrwałych uzupełnień estetycznych. Wysoka zawartość ultra-drobnych cząstek szkła barowego i technologia pełnego pokrycia powłoką silanu (FSC) dają G-æniał Universal Injectable niezwykłą wytrzymałość - wyższą niż wiodące, dostępne na rynku kompozyty typu pasta.

Art.-Nr. 10006897 ampułki unitip A2
Art.-Nr. 10006898 ampułki unitip A3

G-æniał Universal Injectable; 255 zł
Ampułki 15 x 0,16 ml/0,27 g

Odcienie: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE

Art.-Nr. 10003706 strzykawka A2
Art.-Nr. 10003707 strzykawka A3

G-æniał Universal Injectable; 170 zł
Strzykawka 1,7 g (1,0 ml); 10 końcówek dozujących typu długa igła, 1 osłona chroniąca przed światłem



Więcej informacji o G-æniał Universal Injectable można znaleźć na stronie 7 w części GABINET.

GC Fuji™ IX GP

Samoutwardzalny, podatny na upychanie materiał glosjonomerowy o wysokiej lepkości do wypełnień w wersji normalnie wiążącej

Art. Nr 10000563 **Fuji IX GP Kapsułki A2**, 520 zł
Art. Nr 10000564 **Fuji IX GP Kapsułki A3**, 520 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Inne dostępne opakowania:

FUJI IX GP proszek/płyn

Zestaw 1-1 zawiera: 15 g proszek A3, 6,4ml płyn, akcesoria

Cena jednego opakowania: 385 zł

Zestaw 3-2 zawiera:

3 x 15 g proszek A2, A3, B3; 2 x 6,4 ml płyn, akcesoria

Cena jednego opakowania: 920 zł

Uzupełnienie: 15 g proszek: 250 zł; 6,4 ml płyn: 170 zł

Odcienie: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4



GC Fuji IX GP FAST

Samoutwardzalny, podatny na upychanie materiał glosjonomerowy o wysokiej lepkości do wypełnień w wersji szybkowiążącej

Art. Nr 003289 **Fuji IX GP FAST Kapsułki A2**, 610 zł
Art. Nr 003290 **Fuji IX GP FAST Kapsułki A3**, 610 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4



GC Fuji IX GP EXTRA

Samutwardzalny, podatny na upychanie materiał glosjonomerowy do wypełnień o wysokiej lepkości i zwiększonej przezierności

Art. Nr 10000571 **Fuji IX GP EXTRA Kapsułki A2**, 530 zł
Art. Nr 10000572 **Fuji IX GP EXTRA Kapsułki A3**, 530 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, asortyment

Inne dostępne opakowania:

FUJI IX GP EXTRA proszek/płyn

Zestaw 1-1 zawiera: 15 g proszek A2 lub A3,

6,4 ml płyn, akcesoria

Cena jednego opakowania: 425 zł

Uzupełnienie: 15 g proszek: 280 zł; 6,4 ml płyn: 190 zł

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4



GC Fuji II LC

Światłoutwardzalny, modyfikowany żywicą materiał glosjonomerowy do wypełnień

Art. Nr 003234 **Fuji II LC Kapsułki A2**, 620 zł
Art. Nr 003235 **Fuji II LC Kapsułki A3**, 620 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

Inne dostępne opakowania:

FUJI II LC Improved proszek/płyn

Zestaw 3-2 zawiera: 3 x 15 g proszek (A2, A3 i B3);

2 x 6,8 ml płyn; akcesoria

Cena jednego opakowania: 1 285 zł

Uzupełnienie: 15 g proszek: 320 zł; 6,4 ml płyn: 275 zł

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2



KORZYSTNA
CENA

3 + 1

Zamów 3 opakowania po 50 kapsulek Fuji IX GP, Fuji IX GP FAST, Fuji IX GP EXTRA, Fuji II LC, Fuji TRIAGE, Fuji Plus lub Fuji I w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie (50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2 lub Fuji II LC A2 GRATIS¹!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

GC Fuji TRIAGE

Glosjonomerowy materiał o niskiej lepkości, o działaniu ochronnym i kariostatycznym

Art. Nr 003297 **Fuji TRIAGE kapsułki w odcieniu Pink**, 570 zł
Art. Nr 003298 **Fuji TRIAGE kapsułki w odcieniu White**, 570 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: Pink – różowy, White – biały



GC Fuji I

Glasjonomerowy materiał do rutynowych procedur cementowania, idealny do osadzania prac na podbudowie metalowej

Art. Nr 10000503 **Fuji I, w odcieniu Light Yellow**, 495 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: Light Yellow

Inne dostępne opakowania:

Fuji I proszek/płyn

Zestaw 1:1 zawiera: 35 g proszek, 20 ml płyn

Cena jednego opakowania: 515 zł

Odcienie: Light Yellow



GC Fuji PLUS

Modyfikowany żywicą cement glosjonomerowy do osadzania prac protetycznych

Art. Nr 10000509 **Fuji PLUS kapsułki A3**, 640 zł
Art. Nr 10000508 **Fuji PLUS kapsułki Yellow**, 640 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A3, Yellow

Inne dostępne opakowania:

Fuji PLUS proszek/płyn

Zestaw 1:1 zawiera: 15 g proszek, 7 ml płyn, 6,5 g

Conditioner

Uzupełnienie: 15 g proszek: 310 zł; 7 ml płyn: 200 zł

Cena jednego opakowania: 590 zł

Odcienie: A3, yellow, przezierny

EQUIA Forte HT ZESTAW CLINIC

Zawiera: 200 kapsulek, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml

MIESZALNIK SILVERMIX I APLIKATOR GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Clinic
+ Mieszalnik SilverMix
+ aplikator do kapsulek GRATIS!

EQUIA Forte HT Zestaw Clinic; 2 360 zł
Opakowanie zawiera: 200 kapsulek EQUIA Forte HT Fil,
EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria
Odcienie: A2, A3, B2

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.



EQUIA Forte™ HT

Najnowszy szklano-hybrydowy system
odtwórczy typu bulk fill - Twój niezawodny
partner przy odbudowie zębów bocznych

NOWOŚĆ Nowe opakowanie jednostkowe

EQUIA Forte Coat

Samoadhezyjny kompozytowy lakier ochronny



EQUIA Forte Coat to samoadhezyjny, kompozytowy lakier ochronny
z nanowypełniaczem, który chroni materiał odtwórczy, optymalizując
w ten sposób jego właściwości fizyczne. Jest elementem składowym
szklano - hybrydowego systemu odtwórczego EQUIA Forte HT.
Kolor nakrętki i etykiety butelki EQUIA Forte Coat został zmieniony tak,
aby umożliwić bezproblemowe odróżnienie od butelki naszego systemu
wiążącego (G-Premio BOND).



**EQUIA Forte HT –
technologia hybrydowa
• zwiększona przezierność
• jeszcze łatwiejsze stosowanie**

WSKAZANIA

- Wypełnienia ubytków klasy I/
ostateczne
- Narażone na przeciężenia
zgryzowe wypełnienia ubytków
klasy II/ ostateczne
- Pośrednie wypełnienia długoczasowe
- Wypełnienia ubytków klasy V
i w obrębie cementu korzeniowego,
odbudowa zębów korony

EQUIA Forte HT ZESTAW INTRO

Zawiera: 20 kapsulek,
20 ampułek EQUIA Forte Coat

APLIKATOR GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Intro
(20 kapsulek, 20 jednostkowych ampułek EQUIA Forte Coat)
+ aplikator do kapsulek GRATIS!

EQUIA Forte HT Zestaw Intro, 395 zł
Opakowanie zawiera: 20 kapsulek, 20 jednostkowych
ampułek EQUIA Forte Coat
Odcienie: A2, A3, B2

- Mocniejszy i nieklejący się materiał,
idealny do aplikacji typu bulk fill
- Zwiększona przezierność
- Eliminuje zakładanie koferdamu
i nakładanie środka łączącego
- Doskonała biokompatybilność
- Prosta, zaledwie kilkietapowa procedura
odbudowy zębów bocznych - bez
konieczności absolutnej izolacji
- Odbudowa wrażliwych, dotkniętych
hipomineralizacją zębów (MIH)
u młodych pacjentów

Podane ceny oparte są na cenach detalicznych rekomendowanych przez producenta. Aktualne ceny sprzedaży można uzyskać bezpośrednio u autoryzowanego dystrybutora produktów GC.

NOWOŚĆ



Zeskanuj, aby
obejrzeć filmy wideo



EQUIA Forte HT ZESTAW PROMO

Zawiera: 100 kapsulek,
1 x EQUIA Forte Coat 4 ml

EQUIA Forte HT ZESTAW INTRO GRATIS!

Zawiera: 20 kapsulek,
20 ampułek EQUIA Forte Coat

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw
Promo (100 kapsulek, 1 EQUIA Forte Coat 4ml)
+ 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Intro A2
(20 kapsulek, 20 jednostkowych ampułek EQUIA
Forte Coat) GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Dostępne opakowania:

EQUIA Forte HT Fil uzupełnienie, 660 zł
Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
(proszek 0,40 g i płyn 0,13 g/0,10 ml).
Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,14 ml.
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

EQUIA Forte HT Zestaw Intro, 395 zł
Opakowanie zawiera: 20 kapsulek, 20 jednostkowych
ampułek EQUIA Forte Coat
Odcienie: A2, A3, B2

EQUIA Forte HT Zestaw Promo, 1 360 zł
Zestaw zawiera: 100 kapsulek EQUIA Forte HT Fil,
EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria
Odcienie: A2, A2-A3, A3, A3-B2

EQUIA Forte HT Zestaw Clinic; 2 360 zł
Opakowanie zawiera: 200 kapsulek EQUIA
Forte HT Fil, EQUIA Forte Coat butelka 4 ml,
akcesoria
Odcienie: A2, A3, B2

Art. Nr 901573
EQUIA Forte Coat Butelka
Butelka 4 ml, akcesoria, 325 zł

Art. Nr 900960
EQUIA Forte Coat Unit dose
50 jednostkowych ampułek
(po 0,1 ml), akcesoria, 465 zł

MATERIAŁY SZKŁO-JONOMEROWE / SZKLANO-HYBRYDOWE GC (6 OPAKOWAŃ)

MIESZALNIK SILVERMIX GRATIS!

Zamów 6 opakowań po 50 kapsulek materiałów
szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych GC
+ Mieszalnik SilverMix GRATIS!

Promocja dotyczy wszystkich materiałów
szkło-jonomerowych/ szklano-hybrydowych.
Dotyczy materiałów w kapsułkach.
Możliwość mieszania kolorów.
Promocja obowiązuje po uzgodnieniu
z konsultantem GC.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.



GC FujiCEM™ Evolve

Rozwiązanie do osadzania cyrkonu od lidera w technologii szkło-jonomerów

O jeden krok do przodu

FujiCEM Evolve to wszechstronne rozwiązanie do cementowania w codziennej pracy, łączące prosty protokół postępowania z wyjątkowymi właściwościami szkło-jonomerów GC.

Nowy system dozowania i możliwość utwardzenia światłem w celu usunięcia pozostałości materiału, ułatwiają cementowanie. Ponadto FujiCEM Evolve charakteryzuje się ulepszonymi właściwościami, takimi jak wyższa nieprzepuszczalność dla promieni rtg i bardziej trwałe wiązanie - zwłaszcza z tlenkiem cyrkonu.

Idealny do uzupełnień z metalu i cyrkonu

- Optymalna adhezja do cyrkonu
- Wersja do mieszania ręcznego lub Automix
- Bez konieczności wcześniejszego przygotowania
- Długi czas pracy, krótki czas wiązania
- Odporny na wilgoć - koferdam nie jest wymagany
- Doskonałe uszczelnienie i adaptacja brzeżna
- Optymalna lepkość
- Minimalna grubość warstwy
- Opcjonalne utwardzanie światłem

KORZYSTNA CENA

JUŻ TERAZ ZACZNIJ STOSOWAĆ

10%

365 zł
405 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 012951 **FujiCEM Evolve Single Pack**

Opakowanie zawiera: 1 strzykawkę FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 15 końcówek GC Push and Click Tip Regular; 365 zł

Inne dostępne opakowania:

Art. Nr 012952
FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), bloczek N° 22 do mieszania; 880 zł

Art. Nr 012953
FujiCEM Evolve Triple Pack Automix
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 45 końcówek GC Push and Click Tip Regular; 1 030 zł

Art. Nr 013584
FujiCEM Evolve Clinic Pack
Opakowanie zawiera: 8 strzykawek FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 2 bloczki do mieszania N° 22; 2 085 zł

Akcesoria:
Art. Nr 012954
Końcówki Push and Click Tip Regular (15 szt.); 100 zł

Art. Nr 012955
Końcówki Push and Click Tip Endo (15 szt.); 135 zł

GC FujiCEM 2 Slide & Lock

Wysokiej jakości, modyfikowany żywicą cement glasonomerowy do osadzania w połączeniu z innowacyjną technologią Force & Fusion

Art. Nr 10003463
GC FujiCEM 2 Zestaw Starter z metalowym dozownikiem Paste Pak, 1 035 zł
1 x nabój FujiCEM 2 SL (13,3 g/7,2 ml), 15 x końcówka mieszająca SL, 5 x końcówka mieszająca do Endo, 1 x metalowy dozownik Paste Pak

Art. Nr 10003462
GC FujiCEM 2 Zestaw Starter z dozownikiem z tworzywa GC FujiCEM 2, 730 zł
1 x nabój FujiCEM 2 SL (13,3 g/7,2 ml), 15 x końcówka mieszająca SL, 5 x końcówka mieszająca do Endo, 1 x dozownik z tworzywa GC FujiCEM 2

Art. Nr 10003461 **GC FujiCEM 2 SL Automix**, 1 365 zł
2 x nabój FujiCEM 2 SL (po 13,3 g/7,2 ml), 44 x końcówka mieszająca SL

Art. Nr 10003458 **GC FujiCEM 2 SL - uzupełnienie**, 1 020 zł
2 x nabój FujiCEM 2 SL (po 13,3 g/7,2 ml), 2 x bloczek do mieszania N°22



Akcesoria:
Art. Nr 10003465 **FujiCEM 2 Mixing Tip SL** for Endo uzupełnienie, 125 zł
10 x końcówka mieszająca SL do Endo GC FujiCEM 2 SL (kompatybilna tylko z FujiCEM 2 SL)

Art. Nr 10003464 **FujiCEM 2 Mixing Tip SL** uzupełnienie, 220 zł
20 x końcówka mieszająca SL GC FujiCEM 2 (kompatybilne tylko z FujiCEM 2 SL)

KORZYSTNA CENA

FujiCEM 2 SL
ECO PACK

1530 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003468
FujiCEM 2 SL Eco pack
Zawiera: 4 x nabój FujiCEM 2 SL (po 13,3 g/7,2 ml)

FREEGENOL TEMPORARY PACK

Cement do tymczasowego osadzania

FREEGENOL jest cementem bez eugenolu do tymczasowego cementowania uzupełnień pośrednich. Jest w pełni kompatybilny i bezpieczny w użyciu z materiałami zawierającymi żywice akrylowe. Biokompatybilny z tkankami zęba i tkankami miękkimi. FREEGENOL jest łatwy w użyciu i ma po zmieszaniu gładką, kremową konsystencję.

- Nie zawiera eugenolu, nie ma negatywnego wpływu na polimeryzację materiałów zawierających żywicę
- Możliwość dostosowania konsystencji
- Łatwy do usunięcia z koron i zębów
- W zestawie specjalny środek czyszczący



Art. Nr 10000675
FREEGENOL TEMPORARY 1-1 Pack, 240 zł
Opakowanie zawiera: 55 g Baza, 20 g Katalizator, 2,5 ml środek czyszczący, bloczek do mieszania

Wskazania:

- Tymczasowe cementowanie uzupełnień pośrednich.
- Czas wiązania można dostosować w zależności od potrzeb:
 - więcej bazy
 - wiązanie szybsze
 - mniej bazy
 - wiązanie wolniejsze

GC Fuji TEMP LT™

Bezkompromisowy, niezawodny, komfortowy przy zdejmowaniu cement glasonomerowy do długotrwałego cementowania tymczasowego

- Gwarantuje retencję i łatwe usuwanie
- Łatwe osadzanie dzięki cienkiej warstwie materiału (6 µm)
- Początkowa konsystencja podobna do gumy dla łatwego usuwania nadmiarów
- Widoczny na zdjęciach rtg
- Idealny do cementowania na łącznikach implantów



Art. Nr 004253
GC Fuji TEMP LT uzupełnienie, 740 zł
Opakowanie zawiera: 2 naboje Fuji TEMP LT (2 x 13,3 g/7,2 ml), 1 bloczek do mieszania N° 22

GC Fuji TEMP LT UZUPEŁNIENIE

Paste Pak
Dispenser GRATIS!

740 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 1 opakowanie Fuji TEMP LT uzupełnienie + Paste Pak Dispenser o wartości 465 zł GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Akcesoria:
Art. Nr 001573 **Paste Pak Dispenser**, podajnik 465 zł

TEMPSMART™ DC

Podwójnie utwardzalny kompozyt do tymczasowych koron i mostów.

Estetyczne rezultaty

- Fluorescencja i długotrwały połysk

Inteligentna koncepcja

- Krótki czas obróbki dzięki opcji utwardzania światłem

Pełna wytrzymałość

- Wysoka odporność na złamania
- Idealny na mosty w odcinku bocznym

Komfort użytkowania

- Nie klei się
- Wysoki połysk w kilku krokach



Nabój 48 ml, 16 końcówek mieszających; 410 zł
Odcienie: A1, A2, A3, A 3.5, B1, BW

Inne dostępne opakowania:
Strzykawka 10 ml, 10 końcówek mieszających; 245 zł
Odcienie: A1, A2, A3, A 3.5, B1

KORZYSTNA CENA

3 +1

410 zł

Cena jednego opakowania

TEMPSMART DC 48 ml nabój

Zamów 3 opakowania TEMPSMART DC nabój 48 ml + 1 opakowanie TEMPSMART DC A2 lub A3 nabój 48 ml GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Akcesoria:
Art. Nr 901537 **Końcówki mieszające II SSS** (60 szt.); 295 zł
Art. Nr 900668 **Końcówki mieszające GC Automix Tip Regular** (10 szt.); 60 zł

GRADIA® CORE

Podwójnie utwardzalny kompozyt do odbudowy zrębu i cementowania wkładów

Niezawodna retencja na całej głębokości



Cementowanie wkładu i odbudowa zrębu jednym tiksotropowym materiałem



Zachowuje się podobnie jak zębina

Twardość* (Hv) 66

* W trybie podwójnego utwardzania
Źródło: GCC R&D - dane dostępne na życzenie



Siła wiązania z zębiną (MPa), podwójne utwardzanie 21



Bezpieczna retencja przy użyciu uniwersalnego systemu łączącego

Źródło: GCC R&D - dane dostępne na życzenie

Dostępne opakowania:
Art. Nr 900784 **GRADIA CORE Intro Package**
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g),
G-Premio BOND 5 ml butelka,
G-Premio BOND DCA 3 ml butelka,
podajnik GRADIA CORE Dispenser;
Cena jednego opakowania: 965 zł

Art. Nr 013046 **GRADIA CORE Kit**
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g),
G-Premio BOND 5 ml butelka,
G-Premio BOND DCA 3 ml butelka;
Cena jednego opakowania: 930 zł

Art. Nr 003652 **GRADIA CORE cartridge Refill**
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g)
Cena jednego opakowania: 465 zł

GC FIBER POST

Wkłady z włókna szklanego



GC FIBER POST to konwencjonalne wkłady z włókna szklanego, które zapewniają stabilność, widoczność na zdjęciach rtg i przewodnictwo światła - dla uzyskania maksymalnej wydajności w prostych kanałach.

- Dostępne w pięciu średnicach, w tym bardzo cienkie wkłady 0,8 mm i 1 mm
- Równomierny i gęsty rozkład włókien we wkładzie (77% wagi) zapewnia wysoką odporność na obciążenia i wytrzymałość na zginanie, podobną do wytrzymałości metalu
- Unikalny system transmisji światła zapewnia lepszą polimeryzację kompozytu do osadzania
- Widoczność na zdjęciu rtg dla nieskomplikowanej diagnostyki

Art. Nr 400101 **GC FIBER POST Assortment Kit**
Zestaw zawiera: 15 wkładów z włókna szklanego:
5 x 1,0 mm; 5 x 1,2 mm; 5 x 1,4 mm; 2 wiertła:
1 x 1,2 mm; 1 x 1,4 mm
Cena zestawu: 1 290 zł

GC FIBER POST Drill uzupełnienie; 180 zł
Art. Nr 400107 **1 x 1,2 mm**
Art. Nr 400108 **1 x 1,4 mm**
Art. Nr 400109 **1 x 1,6 mm**

GC FIBER POST uzupełnienie; 515 zł
Art. Nr 400102 **0,8 mm**, 10 szt.
Art. Nr 400103 **1,0 mm**, 10 szt.
Art. Nr 400104 **1,2 mm**, 10 szt.
Art. Nr 400105 **1,4 mm**, 10 szt.
Art. Nr 400106 **1,6 mm**, 10 szt.

Akcesoria:
Art. Nr 009553 **G-Multi Primer**,
5 ml płyn; 300 zł

D-Light® Pro

Zobacz więcej niż może dostrzec oko
Lampa LED do polimeryzacji o dwóch długościach fali,
z możliwością sterylizacji w autoklawie i trybem detekcji



Utwardzanie

- Tryb HP - wysokiej mocy 1400 mW/cm²
- Niebieska dioda LED emitująca światło o długości fali od 460 do 465 nm
- Fioletowa dioda LED emitująca światło o długości fali od 400 do 405 nm
- Skuteczna polimeryzacja innych dostępnych na rynku fotoinicjatorów

Ochrona

- Tryb LP - niskiej mocy, przy zredukowanej mocy wyjściowej 700 mW/cm², np. w przypadku głębokich ubytków, gdy obszar preparacji znajduje się w pobliżu miazgi

Wykrywanie

- Tryb DT - detekcji, wykorzystuje tylko światło bliskie ultrafioletu
- Wizualizacja płytki nazębnej
- Wizualizacja zainfekowanej zębiny
- Wizualizacja mikroprzecieków
- Ocena aktywności bakterii w bruzdach
- Wizualizacja materiałów fluorescencyjnych
- Ocena głębokości pęknięć

Sterylizacja w autoklawie

PRODUKTY GC
DO WYBORU

D-LIGHT PRO GRATIS

Zamów produkty GC (G-ænial, Essentia, everX Flow, Cerasmart270 lub EQUIA Forte HT) o wartości co najmniej 15 450 zł + D-Light Pro GRATIS¹!


¹ Możliwość indywidualnej, dopasowanej do potrzeb gabinetu konfiguracji zestawu produktów po uzgodnieniu z konsultantem GC.

KORZYSTNA CENA

5 065 zł

~~6 175 zł~~

Art.-Nr. 901412 **D-Light Pro** 5 065 zł
Zawiera: rękojeść i moduł elektroniczny, światłowód (8 mm) baterie akumulatorowe (2 szt.), stację ładującą, zasilacz, adapter EU/UK, osłonę chroniącą przed światłem, miękkie osłony oczu (3 szt.)

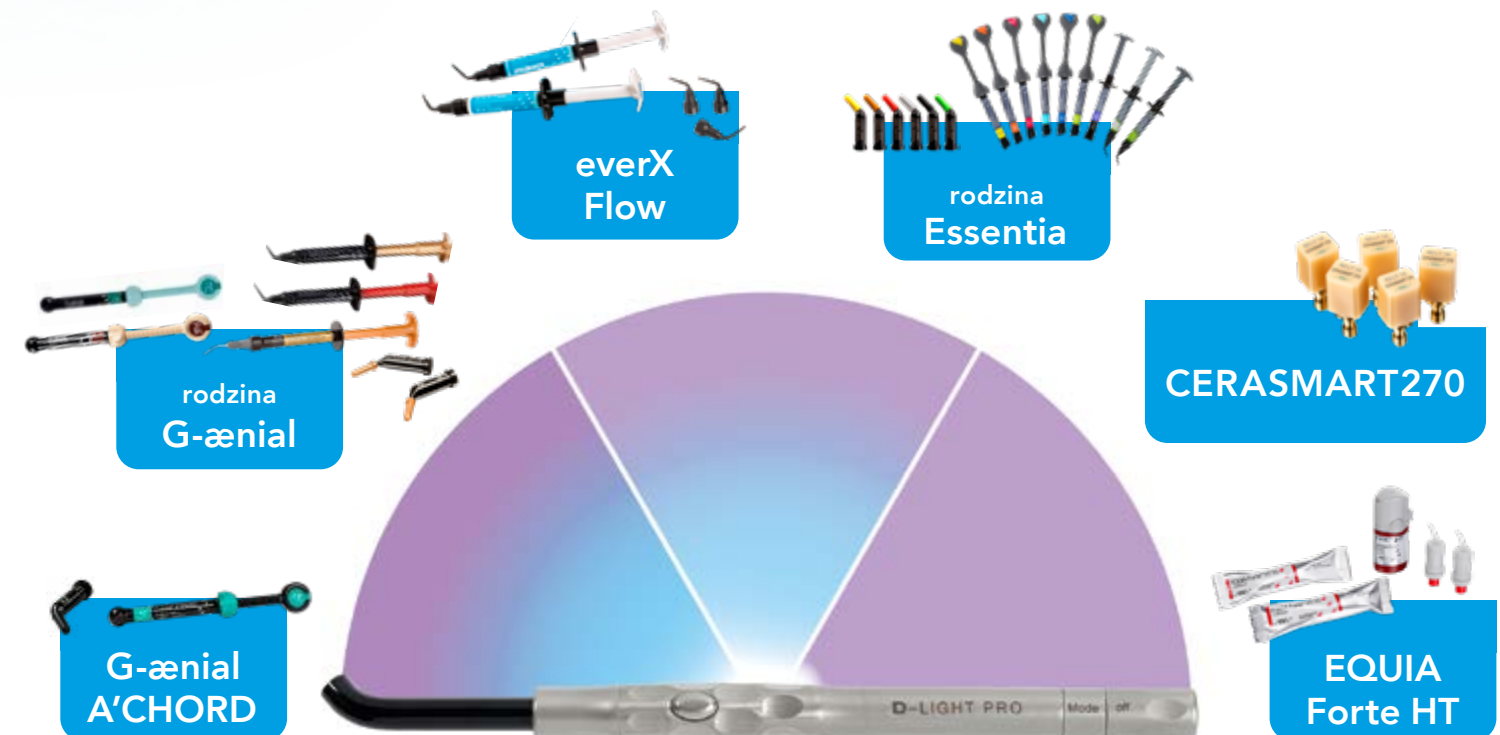

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH)

Globalny problem, który dotyka co siódme dziecko

Rozwiązania terapeutyczne z GC w leczeniu hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej

Wstępne postępowanie terapeutyczne w domu i gabinecie

- Ochrona i znoszenie nadwrażliwości za pomocą GC MI Paste Plus (krem do znoszenia nadwrażliwości i ochrony z technologią Recaldent) i MI Varnish (22 600 ppm jonów fluoru z Recaldent)
- Stabilizacja i ochrona powierzchni przed próchnicą i nadwrażliwością z GC Fuji TRIAGE, płynnym glasonomerem, który może być stosowany bez wytrawiania i systemu łączącego

Leczenie odtwórcze

- Średniej wielkości ubytki można uzupełnić za pomocą światłoutwardzalnego, modyfikowanego żywicy glasonomeru Fuji II LC
- Szklana hybryda EQUIA Forte HT przeznaczona jest do stosowania jako materiał do ostatecznej minimalnie inwazyjnej odbudowy. Szybka aplikacja typu bulk i tolerancja na wilgoć to ogromna zaleta w przypadku młodego, niespokojnego pacjenta
- G-ænial Universal Injectable wykazuje bardzo wysoką wytrzymałość na zużycie dzięki technologii FSC
- Do szybkiej aplikacji kompozytu użyj uniwersalnego systemu łączącego G-Premio BOND, który zawiera MDP i 4-MET dla zapewnienia długotrwałego połączenia



1 łagodna postać MIH 2 umiarkowana postać MIH 3 siekacze dotknięte MIH 4 ciężka postać MIH

1 © Prof. van Amerongen, Niderlandy; 2 - 4 © Prof. Baroni, Włochy

NEW METAL STRIPS

Metalowe paski do wykańczania

Paski metalowe pokryte galwanicznie cząstkami tlenku glinu i oznaczone kolorami, przeznaczone do konturowania powierzchni stycznych i wykańczania materiałów wypełnieniowych.

- Poręczne, bardzo elastyczne i wytrzymałe
- Bardzo cienkie, a jednocześnie odporne na rozerwanie
- Mogą być kilkakrotnie sterylizowane i autoklawowane
- Różne wielkości nasypu (N°200, N°300, N°600, N°1000)
- Różne szerokości (2,6 mm, 3,3 mm, 4,0 mm i 6,0 mm)

Art. Nr 004847 **Metal Strips Asortyment**
Zestaw zawiera: 12 szt. po 1 sztuce z każdej szerokości i ziarnistości.
Cena zestawu: 360 zł

Opakowania asortymentowe:
Opakowanie zawiera: 12 pasków, po 4 sztuki w szerokości 2,6 mm, 3,3 mm i 4,0 mm.
Cena opakowania: 350 zł

Art. Nr 004848 **Metal Strips Red**
Preparacja zgrubna; (4 x 3) x N° 200
Art. Nr 004849 **Metal Strips Blue**
Preparacja; (4 x 3) x N° 300
Art. Nr 004850 **Metal Strips Green**
Wykończenie; (4 x 3) x N° 600
Art. Nr 004851 **Metal Strips Yellow**
Polerowanie; (4 x 3) x N° 1000

Opakowania uzupełniające,
szerokość 6 mm
zawiera: 12 pasków w jednej ziarnistości i jednej szerokości 6,0 mm
Cena opakowania: 360 zł

Art. Nr 004852 **Metal Strips Red**
Preparacja zgrubna; 12 x N° 200
Art. Nr 004853 **Metal Strips Blue**
Preparacja; 12 x N° 300
Art. Nr 004854 **Metal Strips Green**
Wykończenie; 12 x N° 600
Art. Nr 004855 **Metal Strips Yellow**
Polerowanie; 12 x N° 1000



ROZWIĄZANIA GC DO LECZENIA MIH

GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Remineralizujące kremy ochronne do zębów o potrójnym działaniu: wzmacniają, ochraniają, uzupełniają.

Tooth Mousse czy MI Paste Plus?

Tooth Mousse i MI Paste Plus mogą być stosowane do tych samych wskazań. Tooth Mousse jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 6 lat w celu uniknięcia ryzyka fluorozę. Ponadto produkt nadaje się również do przypadków, w których nie jest wymagana ani pożądana suplementacja fluorkowa. Do stosowania na noc Tooth Mousse zaleca się do 12. roku życia. MI Paste Plus można stosować od tego wieku.

MI Paste Plus & Tooth Mousse

- Pierwsze, wypróbowane i przetestowane miliony razy kremy ochronne do zębów z opatentowanym kompleksem aktywnym RECALDENT™
- Zaopatruje zęby w niezbędną ilość wapnia, fosforu i fluoru*
- Eliminuje nadwrażliwość
- Idealne zdrowie zębów, stała ochrona, wzmocnienie i regeneracja
- Działa szybko i skutecznie
- Bezcukrowa ochrona zębów

* MI Paste Plus zawiera dodatkowo 900 ppm fluoru



CPP-ACPF (fosfopeptyd kazeiny oraz amorficzny fosforan wapnia i fluoru) został opracowany przez School of Dental Science na University of Melbourne w Australii. RECALDENT™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym na licencji RECALDENT™ Pty. Ltd. RECALDENT™ CPP-ACP pochodzi z białka mleka. Nie należy go stosować u pacjentów z alergią na białko mleka i hydroksybenzoesan.

EPITEX™

Paski z tworzywa sztucznego do wykańczania i polerowania

Łatwe wykańczanie i polerowanie przestrzeni międzyzębowych, przeznaczone do wypełnień glasonomerowych i kompozytowych.



Art. Nr 000404 **EPITEX Starter Kit**
Zestaw zawiera: Stojak z dyspenserami pasków po 10 m we wszystkich dostępnych rodzajach ziarnistości (gruboziarniste-niebieskie, średnioziarniste-zielone, drobnoziarniste-szare, extra drobnoziarniste-czerwone, przezroczyste)
Cena zestawu: 845 zł



Zamów 2 opakowania (po 10 szt.)
MI Paste Plus
+ Pluszowa Krówka MI z GC GRATIS¹!

Obowiązuje dla wszystkich dostępnych 10 tubkowych opakowań MI Paste Plus.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

MI Paste Plus Tube 40g (35 ml)
MI Paste Plus opakowanie z 10 tubkami; różne smaki (po 2 tubki w każdym ze smaków: melon, truskawka, tutti-frutti, mięta, wanilia);
MI Paste Plus opakowanie z 10 tubkami dostępne również w jednym smaku; 805 zł

NEW METAL STRIPS
GC MI PASTE PLUS
GC TOOTH MOUSSE
EPITEX



Zamów 2 opakowania (po 10 szt.)
Tooth Mousse
+ Pluszowa Krówka MI z GC GRATIS¹!

Obowiązuje dla wszystkich dostępnych 10 tubkowych opakowań Tooth Mousse.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Tooth Mousse Tube 40 g (35 ml)
Tooth Mousse opakowanie z 10 tubkami; różne smaki (po 2 tubki w każdym ze smaków: melon, truskawka, tutti-frutti, mięta, wanilia);
Tooth Mousse opakowanie z 10 tubkami dostępne również w jednym smaku; 720 zł



- Wyjątkowo cienkie i elastyczne, bardzo odporne na rozerwanie
- Dostosowane do bardzo wąskich przestrzeni międzyzębowych
- Bardzo wytrzymałe
- Cząstki ściernie wtopione w powierzchnię podłoża
- Cztery rodzaje nasypu
- Praktyczny dyspenser do pasków
- Dostępne również jako paski do formówek



Zeskanuj, aby
obejrzeć filmy wideo

System implantologiczny GC Aadva opiera się na nowatorskiej synergii implantoprotetyki z koncepcją stomatologii CAD/CAM. Zapewnia kompleksowe rozwiązania do wszystkich przypadków leczenia implantologicznego. Wszystkie elementy systemu są rozwiązaniami reprezentującymi najbardziej aktualny stan wiedzy i spełniają najwyższe standardy jakości GC.

Linia implantów GC Aadva

Implanty cylindryczne



wąski standardowy szeroki

• Wąski $\varnothing$ 3.3
Długości 8-10-12-14 mm

Implanty stożkowe



wąski standardowy szeroki

• Standardowy $\varnothing$ 4.0
Długości 8-10-12-14 mm

Implanty krótkie



Długość 6,3 mm

• Szeroki $\varnothing$ 5.0
Długości 8-10-12-14 mm

Warsztaty w Twoim gabinecie: rozwiązania i praktyczna wiedza!

- Jak dobrać implant do danego wskazania i jak "odnaleźć się" w kasie chirurgicznej.
- Omówienie komponentów protetycznych wraz z ich wskazaniami.
- Technika flow Injection w implantologii.

Warsztat:

- Preparacja łoża pod implant wraz z jego wprowadzeniem
- Przykręcenie poszczególnych elementów protetycznych
- Zamykanie i maskowanie kanałów w pracach przykręcanych

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z regionalnym konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji lub napisz mail na adres: info.poland@gc.dental

OFERTA NA START*

4 999 zł

Zamów OFERTĘ NA START
+ G-CEM ONE System Kit GRATIS!¹

Zawiera: 10 x implant, 10 x śruba zamykająca, 1 x kaseta chirurgiczna Aadva Surgical Kit + G-CEM ONE System Kit GRATIS!
Zestaw zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawka 4,6 g (A2 i TR), 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml, akcesoria

OFERTA ZE SZKOLENIEM*

6 999 zł

Zawiera: 5 x implant, 5 x śruba zamykająca, + uczestnictwo w szkoleniu nr 4 + wypożyczenie kasety chirurgicznej Aadva Surgical Kit + konsultacje online z lekarzem prowadzącym szkolenie, dotyczące planowania leczenia z wykorzystaniem zakupionych implantów

KORZYSTNA CENA

OFERTA ANALOGOWA*

7 499 zł

Zawiera: 10 x implant, 10 x śruba zamykająca, 10 x śruba gojąca, 10 x analog, 10 x transfer wyciskowy

KORZYSTNA CENA

OFERTA CYFROWA*

7 999 zł

Zawiera: 10 x implant, 10 x śruba zamykająca, 10 x śruba gojąca, 4 x Scan Body, 4 x analog do modeli drukowanych

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
* Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

1 Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym - kurs jednodniowy

Część teoretyczna

Wprowadzenie teoretyczne do zaplanowanych procedur oraz zabiegów z udziałem pacjentów

Część praktyczna

- Ekstrakcje zębów i metody zachowania wyrostka zębodołowego
- Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą przy użyciu osteotomów oraz ekspanderów do kości, z i bez użycia materiałów kościotępczych

- Rozszczepy wyrostków w odcinku przednim/bocznym, pacjenci po wypadkach
- Wydłużenie płata błony śluzowej przedsionka jamy ustnej podczas rozszczeptów
- Zaawansowane techniki szycia przy rozległych cięciach w obrębie jamy ustnej

2 Pierwszy krok w implantologii i implantoprotetyce z systemem GC Aadva - kurs jednodniowy

Część teoretyczna

- Zasady kwalifikacji i planowania leczenia implantologicznego
- Analiza CBCT
- Podstawowe instrumentarium
- Budowa implantu oraz systemu implantologicznego GC Aadva
- Rozwiązania protetyczne

- Leczenie implantoprotetyczne w trudnych sytuacjach anatomicznych (rodzaje zabiegów regeneracyjnych, możliwe komplikacje)
- Stomatologia cyfrowa w leczeniu implantologicznym

Część praktyczna

- Ćwiczenia na modelach: preparacja łoża, wprowadzenie implantu, techniki szycia

3 Wprowadzenie do implantologii na podstawie systemu GC Aadva - kurs jednodniowy

Część teoretyczna

- Wprowadzenie do implantologii - podstawowe zagadnienia implantologii stomatologicznej
- Określenie warunków kostnych
- Pierwotna i wtórna stabilizacja implantu
- Wskazania i przeciwwskazania do implantacji
- Kwalifikacja pacjenta oraz dobór implantu
- Prawidłowa pozycja implantu
- Omówienie systemu implantologicznego GC Aadva (rodzaje implantów, przegląd kasety chirurgicznej)

Część praktyczna

- Ćwiczenia na modelach: przygotowanie instrumentarium do zabiegu, preparacja łoża, wprowadzenie implantu, techniki szycia
- Zabiegi z udziałem pacjentów: preparacja łoża i wprowadzenie implantu (ręczne/maszynowe), zamknięcie implantu, szycie

4 Od implantu do korony na podstawie systemu implantologicznego GC Aadva - kurs trzydniowy

Część teoretyczna

- Wprowadzenie teoretyczne do planowania, implantologii i implantoprotetyki
- Prezentacja przygotowania instrumentarium niezbędnego do zabiegu implantologicznego
- Przygotowanie pacjenta i gabinetu do zabiegu
- Zalecenia dla pacjenta, powikłania

Część praktyczna

- Ćwiczenia na modelach: preparacja łoża i wprowadzenie implantu, zakładanie

- podstawowych komponentów protetycznych, techniki szycia
- Zabiegi z udziałem pacjentów: pojedyncze implantacje, implantacje mnogie w przypadku pacjentów z bezzębiem, odsłonięcie wszczepionego implantu, założenie śruby gojącej, pobranie wycisków (pojedyncze punkty, prace oparte na kilku implantach), osadzanie prac protetycznych (pojedyncze korony, mosty, protezy typu overdenture)



PROWADZĄCY
lek.dent. Tomasz Klatkiewicz

1 SZKOLENIE

Środa Wielkopolska
23.09.2023r. | 09:00-17:00

Koszt uczestnictwa: 1 500 zł



PROWADZĄCY
dr n. med. Krzysztof Gawrołek

2 SZKOLENIE

Gdańsk
07.10.2023r. | 09:00-17:00
Bydgoszcz
09.12.2023r. | 09:00-17:00

Koszt uczestnictwa: 500 zł



PROWADZĄCY
dr n.med. Robert Łyszczyarz

3 SZKOLENIE

Kraków
02.12.2023r. | 09:00-17:00

Koszt uczestnictwa: 1 500 zł



PROWADZĄCY
lek.dent. Tomasz Klatkiewicz

4 SZKOLENIE

Środa Wielkopolska
27.11.2023 | 09:00-17:00

Koszt uczestnictwa: 4 500 zł

Konsultanci GC

Nasi specjaliści ds. produktów są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą Państwu indywidualnej porady.



Tomasz Markowski
SZCZECIN / POZNAN /
GDAŃSK
M. +48 698 648 384
Tomasz.Markowski@gc.dental
Technika Dentystyczna



Magdalena Kujawska
SZCZECIN / KOSZALIN
M. +48 532 534 843
Magdalena.Kujawska@gc.dental
Stomatologia



Małgorzata Dukát
SŁUPSK / GDAŃSK /
OLSZTYN / EŁK
M. +48 697 692 202
Malgorzata.Dukat@gc.dental
Stomatologia



Sebastian Lewandowski
BYDGOSZCZ / TORUN
M. +48 516 035 806
Sebastian.Lewandowski@gc.dental
Stomatologia / Implanty



Krzysztof Szymański
WARSZAWA / OSTROŁĘKA /
ŁOMŻA
M. +48 790 269 100
Krzysztof.Szymanski@gc.dental
Stomatologia



Maria Głabisz
POZNAN
M. +48 605 212 615
Maria.Glabisz@gc.dental
Stomatologia



Agnieszka Sobala
ŁÓDŹ / PŁOCK / RADOM
M. +48 666 857 080
Agnieszka.Sobala@gc.dental
Stomatologia



Marcin Sidor
WROCŁAW / OPOLE /
ZIELONA GÓRA / KALISZ /
KATOWICE / CZĘSTOCHOWA
M. +48 508 278 585
Marcin.Sidor@gc.dental
Technika Dentystyczna



Joanna Łaban-Nanowska
WROCŁAW / ZIELONA GÓRA
M. +48 664 700 144
Joanna.LabanNanowska@gc.dental
Stomatologia



Dominika Ostrowska
KATOWICE / OPOLE /
CZĘSTOCHOWA
M. +48 662 012 689
Dominika.Ostrowska@gc.dental
Stomatologia



Piotr Dąbrowski
KRAKÓW / KIELCE
M. +48 505 402 204
Piotr.Dabrowski@gc.dental
Stomatologia / Implanty




Magdalena Olko
RZESZÓW / SANDOMIERZ /
ZAMOŚĆ
M. +48 697 578 193
Magdalena.Olko@gc.dental
Stomatologia



Jakub Baranowski
WARSZAWA / BIAŁYSTOK /
LUBLIN
M. +48 514 830 002
Jakub.Baranowski@gc.dental
Stomatologia



Rafał Rumak
WARSZAWA / BIAŁYSTOK / ŁÓDŹ /
LUBLIN / RZESZÓW / KRAKÓW /
KIELCE
M. +48 698 167 808
Rafal.Rumak@gc.dental
Technika Dentystyczna

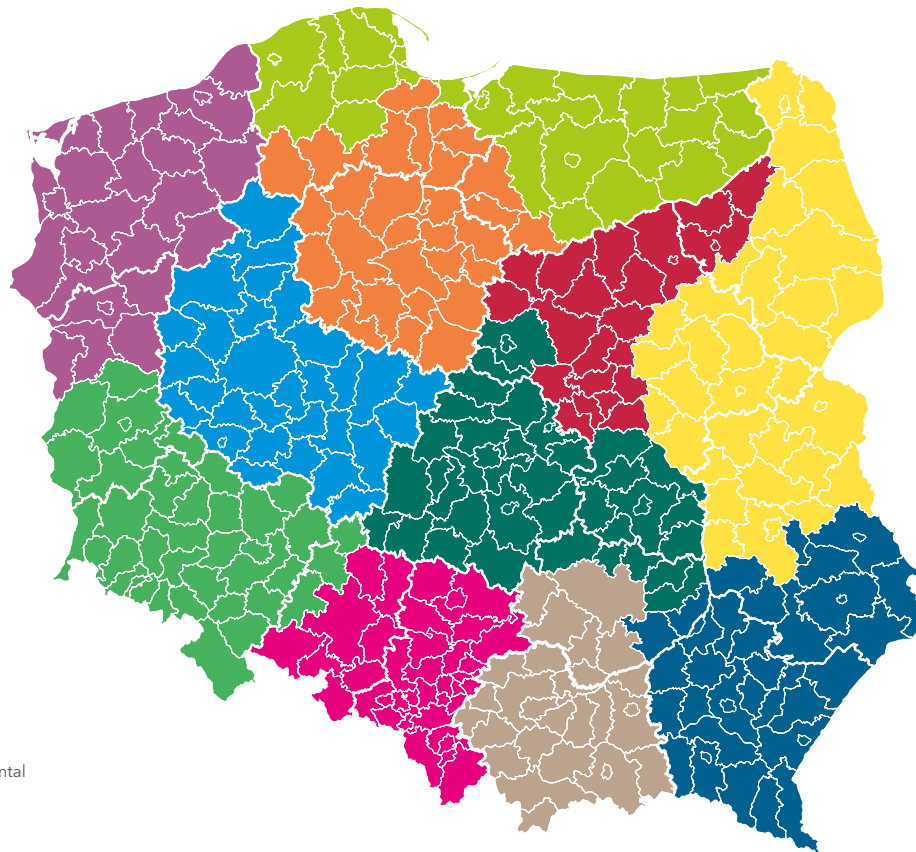**Szkolenia praktyczne w Twoim gabinecie: rozwiązania i praktyczna wiedza!****Inteligentne rozwiązania z GC do częściowych uzupełnień pośrednich**

Onlay i overlay od A do Z. Przekonaj się jakie to proste z naszymi rozwiązaniami! Preparacja, wybór materiału, wykańczanie i cementowanie częściowego uzupełnienia pośredniego. Zapytaj o karty techniczne do poszczególnych etapów procedury!

Szkolenie praktyczne:

- Charakteryzacja i adhezyjne cementowanie pośredniego uzupełnienia częściowego za pomocą uniwersalnego cementu kompozytowego G-CEM ONE.

Biomimetyczne rozwiązania do odbudowy zębów bocznych

Wybierz swoje optymalne rozwiązanie do odbudowy rozległych ubytków w zębach bocznych: wzmocniony krótkimi włóknami płynny kompozyt everX Flow czy szklano-hybrydowy system odtwórczy EQUIA Forte HT.

Szkolenie praktyczne:

- Odbudowa krok po kroku rozległych ubytków w zębach bocznych

Estetyka łatwa do osiągnięcia z uniwersalnym materiałem kompozytowym

Przekonaj się jak łatwo za pomocą jednego odcienia G-ænial A'CHORD uzyskasz naturalnie wyglądające uzupełnienie w odcinku przednim.

Szkolenie praktyczne:

- Odbudowa krok po kroku ubytków w odcinku przednim techniką uproszczoną i wielowarstwową

Czy szklana hybryda może być trwałą metodą odbudowy?

Poszukujesz idealnego rozwiązania dla pacjentów z wysokim ryzykiem próchnicy juniorów, seniorów czy pacjentów cierpiących na hipomineralizację trzonowcowo-siekaczą (MIH)? Sięgnij po szklano-hybrydowy system odtwórczy EQUIA Forte HT i wykorzystaj jego biomimetyczne właściwości.

Szkolenie praktyczne:

- Odbudowa ubytku klasy I z wykorzystaniem stempla okluzyjnego
- Odbudowa ubytku klasy II z wykorzystaniem anatomicznych matryc sekcyjnych

Wprowadzenie do systemu implantologicznego GC Aadva

Jak dobrać implant do danego wskazania i jak "odnaleźć się" w kasie chirurgicznej. Omówienie komponentów protetycznych wraz z ich wskazaniami. Technika flow Injection w implantologii.

Szkolenie praktyczne:

- Preparacja łoża pod implant wraz z jego wprowadzeniem
- Przykręcenie poszczególnych elementów protetycznych
- Zamykanie i maskowanie kanałów w pracach przykręcanych

Szkolenia**A-La-Carte
w gabinecie**

Zdecyduj się na szkolenie praktyczne GC!

Dostosujemy je do potrzeb Twojej praktyki dentystycznej.

Nasze szkolenia praktyczne A-la-Carte oferują rozwiązania do szerokiej gamy codziennych wyzwań i są przeznaczone dla całego zespołu!

PRZYDATNE
WSKAZÓWKI!

ELASTYCZNY
czas trwania!

BEZPŁATNY
UDZIAŁ!

**JESTEŚ
ZAINTERESOWANY?**

Skontaktuj się z regionalnym konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji lub napisz mail na adres: info.poland@gc.dental



Odwiedź naszą stronę internetową:
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>



Odwiedź profil GC Poland na Facebook'u:
<https://www.facebook.com/GCDentalPoland>



Odwiedź kanał GC Europe na YouTube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts



Odwiedź profil GC Poland na Instagramie:
https://www.instagram.com/gc_poland/



Warsztat

Bezpośrednia licówka kompozytowa – naturalna estetyka w przypadku ekstremalnych wyzwań

Odbudowa w odcinku przednim to dla każdego praktyka codzienność, wielokrotnie stanowiąca duże wyzwanie natury estetycznej. Korzystając z nowoczesnych materiałów kompozytowych, zyskujemy wachlarz możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Warsztaty praktyczne przybliżą każdemu jak w prosty i przewidywalny sposób osiągnąć optymalny wynik leczenia.

Czego się dowiesz?

- W jaki sposób poprawić estetykę zębów przednich z rozległymi ubytkami
- Jak stworzyć naturalną strukturę powierzchni zęba w trzech prostych krokach

WARSZTAT

- Procedura krok po kroku wykonania bezpośrednich licówek kompozytowych w różnych sytuacjach klinicznych
- Procedura polerowania krok po kroku

PROWADZĄCA
lek. dent.
Aleksandra Ślaczka

- 13.10.2023r. Bydgoszcz
- 14.10.2023r. Toruń
- 20.10.2023r. Łomża
- 21.10.2023r. Warszawa
- 24.11.2023r. Katowice
- 25.11.2023r. Łódź
- 01.12.2023r. Słupsk
- 02.12.2023r. Gdańsk



Warsztat

Bezpośrednie uzupełnienia kompozytowe zębów bocznych – naturalna estetyka i funkcja

Wykonywanie bezpośrednich uzupełnień ubytków klasy I i II to nasza codzienność, ale czy zawsze wychodzi nam to perfekcyjnie? Ten praktyczny kurs zawiera wskazówki jak skutecznie, przewidywalnie i powtarzalnie tworzyć takie odbudowy. Pokażemy też, jak zoptymalizować swój czas pracy w stomatologii zachowawczej wykorzystując konkretne techniki i protokoły postępowania.

Czego się dowiesz?

- Jak przewidywalnie odtworzyć naturalną morfologię zębów bocznych metodą pieczętki i metodą cups by cusp – wady i zalety obu technik
- W jaki sposób uzyskać idealny punkt stykowy przy wykorzystaniu matryc sekcyjnych

WARSZTAT

- Odbudowa powierzchni okluzyjnej górnego trzonowca – jak skrócić procedurę modelując guzki na etapie aplikacji materiału
- Uzupełnienie ubytku klasy II – tworzenie idealnego punktu stykowego – tips and tricks
- Stamp technique – czy szklana hybryda może być funkcjonalna i estetyczna?

PROWADZĄCA
lek. dent.
Justyna Żołędziowska

- 29.09.2023r. Mrągowo
- 30.09.2023r. Gdańsk
- 07.10.2023r. Lublin
- 13.10.2023r. Rzeszów
- 14.10.2023r. Zamość
- 01.12.2023r. Szczecin
- 02.12.2023r. Poznań
- 08.12.2023r. Bielsko-Biała
- 09.12.2023r. Kraków

Warsztat

Odbudowa metodą iniekcji kompozytu

Metamorfoza uśmiechu to częsty powód zgłaszania się pacjentów do gabinetów stomatologicznych, a jednocześnie spore wyzwanie dla klinicystów. W dobie stomatologii minimalnie inwazyjnej, poprzez wykorzystanie kompozytu typu flow, technika iniekcyjna jawi się jako doskonałe rozwiązanie powyższego problemu. Na kursie poznacie Państwo podstawy pracy z wykorzystaniem techniki iniekcji kompozytu, a także liczne wskazówki kliniczne i sposoby na uniknięcie błędów w czasie pracy.

Czego się dowiesz?

- Jak przenieść uzupełnienia kompozytowe na wyższy poziom dzięki zastosowaniu przezroczystego silikonu i kompozytu iniekcyjnego o dużej wytrzymałości na zginanie
- Jak uzyskać łatwą i przewidywalną estetykę w szybszy i tańszy sposób bez preparacji zębów

WARSZTAT

- Procedura krok po kroku wykonania licówki kompozytowej i odbudowy startego zęba w odcinku bocznym
- Polerowanie w trzech prostych krokach



PROWADZĄCY
lek. dent.
Daniel Nowakowski

- 27.10.2023r. Rzeszów
- 28.10.2023r. Katowice
- 17.11.2023r. Warszawa
- 18.11.2023r. Poznań
- 08.12.2023r. Gdańsk
- 09.12.2023r. Gdańsk

Warsztat

Praktyczne aspekty wykorzystania różnych technik cementowania

Etap cementowania jest bardzo istotny i przekłada się na sukces kliniczny leczenia protetycznego w aspekcie długoczasowym. Wybór odpowiedniego sposobu cementowania i materiału lutującego podejmowany jest już na etapie planowania leczenia. Podczas warsztatu przedstawiony zostanie algorytm decyzyjny, protokół postępowania zarówno w cementowaniu konwencjonalnym, jak i adhezyjnym w oparciu o przypadki kliniczne.

Czego się dowiesz?

- Kiedy cementować adhezyjnie i jak to zrobić
- Jak wykorzystać cementowanie konwencjonalne i kiedy są do tego ścisłe wskazania w dobie aktualnych technik i materiałów
- Jak dobrze przygotować filar oraz uzupełnienie do procesu cementowania

WARSZTAT

- Cementowanie uzupełnienia typu overlay w zębie trzonowym
- Cementowanie korony na zębie przedtrzonowym
- Cementowanie indywidualnie modelowanego wkładu koronowo-korzeniowego w siekaczu



PROWADZĄCA
dr n. med.
Kamila Wróbel-Bednarz

- 09.09.2023r. Toruń
- 23.09.2023r. Lubin
- 27.10.2023r. Gorzów Wlkp.
- 28.10.2023r. Poznań
- 24.11.2023r. Kraków
- 25.11.2023r. Rzeszów

Get Connected SMILE Program

Zdobywaj wiedzę. Dziel się doświadczeniem. Korzystaj.

GC Get Connected - wszystko w jednej aplikacji!

Skorzystaj z okazji, aby w każdej chwili uzyskać informacje na temat GC i naszych produktów - pobierz aplikację GC Get Connected na swój telefon. Przeglądaj naszą bibliotekę online, oglądaj filmy prezentowane przez użytkowników, dowiedz się o szkoleniach i wydarzeniach, a także uzyskaj informacje o naszych produktach.

W GC, uśmiechy są warte więcej - uczymy się, dzielimy doświadczeniem, korzystamy. Pobierz teraz program "Get Connected Smile Program" na swoją komórkę.



POBIERZ APP

Pobierz GC Get Connected Smile Program jako aplikację na swój telefon komórkowy już dzisiaj i bądź na bieżąco!



Skondensowana wiedza na temat G-ænial A'CHORD dostępna teraz online

G-ænial A'CHORD

W celu jak najłatwiejszego udostępnienia praktykom nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej wiedzy na temat G-ænial A'CHORD, GC uruchomiła specjalną stronę internetową.

<http://gaenialachord.com>

Poza teoretycznymi wyjaśnieniami, strona ta ilustruje np. skalę odcieni. A fakt, że estetykę i wytrzymałość uzupełnień przednich i bocznych można połączyć w jeden prosty system, został potwierdzony w praktyce przez różnych lekarzy dentystów z Australii, Francji czy Niemiec.

Grafiki wizualizują także wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie G-ænial A'CHORD, podczas gdy filmy wideo pokazują praktyczne zastosowanie zarówno w obrazie jak i w dźwięku.



Przewodnik "Restorative solution" z GC

Od początku swojej działalności GC zawsze koncentrowała się na opracowywaniu innowacyjnych materiałów odtwórczych dla każdej sytuacji klinicznej. Aby ułatwić stomatologom te procedury, GC opracowało przewodnik GC Restorative Solution, dostępny jako bezpłatna aplikacja na systemy Android lub iOS.

W zależności od projektowanego uzupełnienia, materiału i uwarunkowań klinicznych aplikacja pomaga wybrać najlepszy materiał odtwórczy. Przewodnik przedstawia w 3D wszystkie rodzaje ubytków i pokazuje ich odbudowę przy użyciu zaawansowanych szkło-jonomerów,

hybrydy szkła i/lub kompozytów GC do odbudowy zębów. Aplikacja zawiera również instrukcje krok po kroku, jakie odcienie i grubości warstw należy stosować, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Ponadto aplikacja zawiera informacje na temat systemów adhezyjnych i technik odbudowy wzmocnionych włóknem szklanym, a także szczegółowe ilustracje dotyczące procedur naprawy uzupełnień pośrednich.



Przewodnik GC dotyczący cementowania

Wybór właściwego materiału dla każdego wskazania

Długotrwałe powodzenie odbudowy zależy przede wszystkim od właściwego doboru i prawidłowego zastosowania materiałów do osadzania. Ponieważ idealny materiał do osadzania, który spełnia wszystkie wymagania dla każdego wskazania nie istnieje, wyboru należy dokonać w zależności od właściwości fizycznych i adhezyjnych, wymagań estetycznych, wrażliwości techniki i dowodów naukowych dostępnych dla każdego przypadku. Aby ułatwić ten proces stomatologom GC opracowało przewodnik GC Luting Guide,

dostępny jako bezpłatna aplikacja na systemy Android lub iOS. W zależności od projektowanego uzupełnienia, materiału i uwarunkowań klinicznych aplikacja pomaga wybrać najlepsze rozwiązanie do cementowania. Oprócz wyboru materiału do osadzania, decydujące znaczenie ma jego prawidłowe zastosowanie. W przewodniku GC Luting Guide każdy etap kliniczny jest od początku do końca szczegółowo opisany i zilustrowany przejrzystymi zdjęciami.

